


Ventana Reagenzien

PATHWAY HER-2/*neu*

(Klon 4B5)

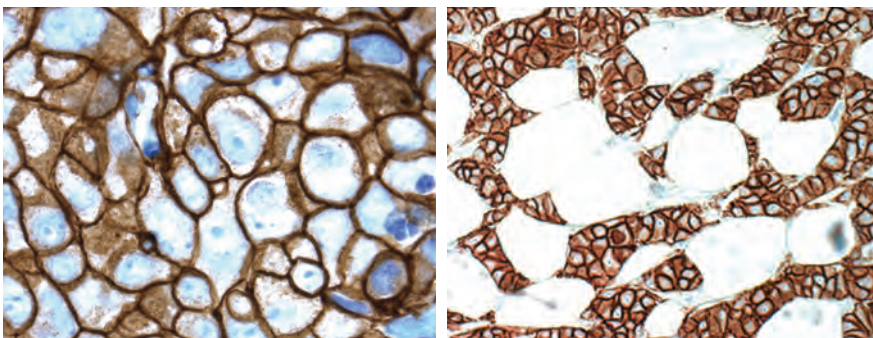


Der PATHWAY HER-2/*neu* (4B5) von Ventana ist ein monoklonaler Kaninchen-Antikörper (IgG) und ist für die *in-vitro*-Diagnostik zugelassen. Der Antikörper dient zur semiquantitativen Bestimmung des HER2-Antigens in Gewebeschnitten von formalinfixiertem, paraffineingebettetem Gewebe mittels eines Ventana Färbeautomaten. Dieser Test ist als Hilfsmittel zur Beurteilung von Brustkrebs-Patientinnen vorgesehen, für die eine Behandlung mit Herceptin® in Erwägung gezogen wird.

PATHWAY anti-HER-2/*neu* (4B5) ist gegen die interne Domäne des c-erbB-2 Onkoproteins (HER2) gerichtet. Der Primärantikörper wurde bereits optimal verdünnt und kann direkt mit den Detektionssystemen *iVIEW* DAB und *ultraVIEW* DAB auf den Färbeautomaten von Ventana eingesetzt werden.

PRIMÄR ANTIKÖRPER

- ✓ Monoklonal, Kaninchen
- ✓ FDA*-PMA-Zulassung
- ✓ Kompatibel mit Ventana Bildanalysesystem (VIAS)
- ✓ Für die *in-vitro*-Diagnostik (IVD)

* FDA: U.S. Food and Drug Administration




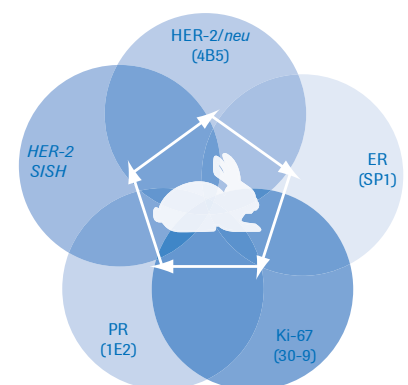


PATHWAY HER-2/*neu* ist Bestandteil des Ventana Biomarker Panels zur diagnostischen Untersuchung von Brustkrebskrankungen.

PATHWAY HER-2/*neu* (4B5) Monoklonaler Kaninchen-Antikörper

Testtyp	Antikörper für die Immunhistochemie
Artikelnr.	790-2991 (50 tests) 05278368001
Klon	4B5
Menge	5 ml Spender (50 Tests)
Lagerung	2–8 °C
Inkubationszeit	16–32 Minuten in Färbeautomaten vom Typ NEXES oder BENCHMARK <i>Serie</i>
Zulassungsstatus	IVD, FDA PMA

Artikelnummern von Ventana in schwarz, Artikelnummern von Roche in blau

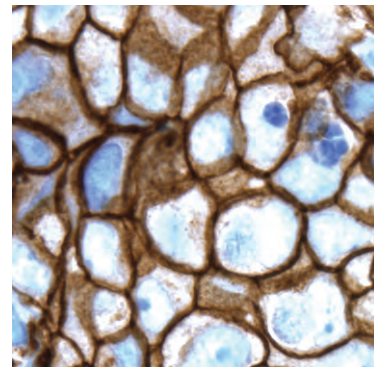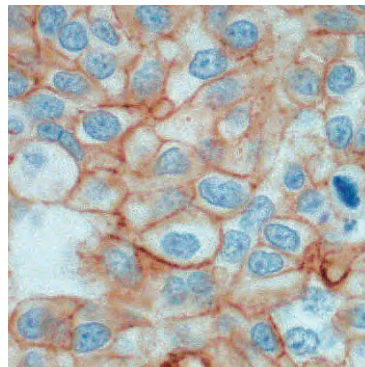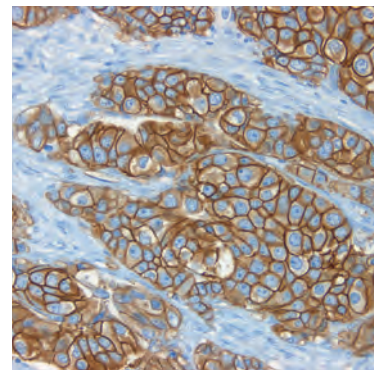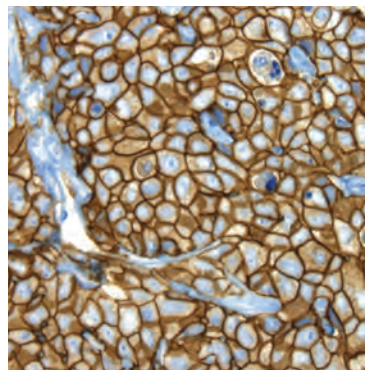

Patient Centred Pathology

WORKFLOW | DIAGNOSTICS

Ventana, BENCHMARK, NEXES, PATHWAY and *ultraVIEW* are trademarks of Roche.
Herceptin® is a registered trademark of Genentech, Inc.
E591 0708B DE

European Headquarters
Ventana Medical Systems, S.A.
Parc d'Innovation - BP 30144
Rue G. de Kaysersberg
F - 67404 Illkirch CEDEX
France
Tel. + 33 (0)3 90 40 52 00

Roche Diagnostics AG
Forrenstrasse
6343 Rotkreuz (ZG)
Switzerland
Tel. +41 (0) 41 7992244

Roche Diagnostics GmbH
Engelhorngasse 3
1211 Wien
Austria
Tel. +43 (0) 1 277870

EC REP

Roche Diagnostics GmbH
Sandhoferstrasse 116
68305 Mannheim
Germany
Tel. +49 (0)621 7590

www.ventanamed.com

© 2009 Ventana Medical Systems

